



70110160

## Quick mobile rail - small (40 cm)

English .....	<b>Instructions for use .....</b>	<b>P. 03</b>
Nederlands .....	<b>Gebruiksaanwijzing .....</b>	<b>P. 04</b>
Deutsch .....	<b>Gebrauchsanweisung .....</b>	<b>S. 05</b>
Français .....	<b>Mode d'emploi .....</b>	<b>P. 06</b>
Dansk .....	<b>Brugsanvisning .....</b>	<b>S. 07</b>
Eesti keel .....	<b>Kasutusjuhend .....</b>	<b>P. 08</b>
Español .....	<b>Manual de instrucciones .....</b>	<b>P. 09</b>
Italiano.....	<b>Manuale d'uso .....</b>	<b>P. 10</b>
Latviešu .....	<b>Lietošanas instrukcija .....</b>	<b>S. 11</b>
Lietuvių .....	<b>Naudojimo instrukcija .....</b>	<b>P. 12</b>
Norsk .....	<b>Bruksanvisning .....</b>	<b>S. 13</b>
Português .....	<b>Manual de instruções .....</b>	<b>P. 14</b>
Русский .....	<b>Инструкция по применению .....</b>	<b>P. 15</b>
Slovenščina.....	<b>Navodila za uporabo .....</b>	<b>P. 16</b>
Suomi .....	<b>Käyttöohje .....</b>	<b>S. 17</b>
Svenska .....	<b>Bruksanvisning .....</b>	<b>S. 18</b>

# VITALITY



# VITILITY

## ENGLISH INSTRUCTIONS FOR USE

# Quick mobile rail - small (40 cm)

## 1. INTENDED USE

The Quick mobile rail is designed to provide support, for example when getting in and out of the shower. The Quick mobile rail can be attached and removed within a few seconds with suction cups. Drilling holes or the use of screws is not necessary. The two powerful suction cups are pressed firmly onto a non-porous, sturdy surface. Just press the vacuum handles down to fix the Quick Mobile rail.

## 2. RISKS & WARNINGS

The evaluation of all risks by VITILITY risk management showed that the remaining residual risk is as low as reasonably possible.

### 2.1 SAFETY GUIDELINES

Please ensure the product is in a faultless condition before use.

### 2.2 POTENTIAL RISKS

#### - INCORRECT ASSEMBLY OR INSTALLATION

Incorrect assembly or installation can lead to reduced performance or dangerous situations.

#### - INSUFFICIENT SUPPORT

The product may provide insufficient support, which can cause discomfort, injury, or worsen physical limitations.

#### - INSTABILITY

Insufficient sturdiness or stability of the product can lead to tipping or falling, which can cause injury or damage.

#### - OVERLOADING DUE TO INCORRECT USE

Using the product in a way it was not designed for can lead to damage to material or structure.

#### - USE BY YOUNG CHILDREN

This product is not suitable for children under 6 years. Use is only allowed under strict adult supervision to prevent possible dangers or misuse.

### 2.3 WARNINGS

The product must be replaced if required by one or more of the following criteria:

- Do not use if the product is damaged.
- The user's general condition is an important part of the risk assessment.

### 2.4 PRECAUTIONS

- People with self-harming behavior should not be left alone with the product.

## 3. WARRANTY

There is a 12 months warranty on this product. The warranty period begins on the date of purchase (shown on

the purchase receipt). During the warranty period, you can submit any complaints about a defective VITILITY-product to your dealer or to the service address specified. In this period, we will repair all defects due to faulty materials or operation free of charge. Improper handling, falls, impacts and the like are excluded from the warranty. A new warranty period does not start if the product is repaired or exchanged; the 12 months warranty period as of the purchase date continues unchanged.

Any warranty expires in the event of non-compliance such as use other than as intended, repairs and alterations made to the head protector or its components by unauthorised people.

## 4. SYMBOLS

The symbols and their explanations can be found on page 19.

## 5. SERIOUS INCIDENT REPORT

In the event of serious incidents related to the use of the device should be reported to your local dealer and the national competent authority in a timely manner. The local dealer will forward the information to the manufacturer.

# Wandbeugel quick mobile rail - klein (40 cm)

## 1. BEOOGD GEBRUIK

De Quick Mobile Rail is ontworpen om te ondersteunen bij een natuurlijke beweging, bijvoorbeeld als men in en uit de douche stapt. De mobiele wandbeugel is in enkele seconden, zonder te boren of te schroeven, aan te brengen en te verwijderen. De twee krachtige zuignappen worden stevig op een gladde, niet poreuze en stevige oppervlakte gedrukt, de vacuümhendels worden naar beneden gedrukt en de Quick Mobile Rail zit vast.

## 2. RISICO'S EN WAARSCHUWINGEN

De evaluatie van alle risico's door het risicomanagement van VITILITY heeft aangetoond dat het resterende restrisico zo laag mogelijk is.

### 2.1 VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Zorg ervoor dat het product in een foutloze staat verkeert vóór gebruik.

### 2.2 POTENTIËLE RISICO'S

#### - ONJUISTE MONTAGE OF INSTALLATIE

Onjuiste montage of installatie kan leiden tot verminderde werking of gevaarlijke situaties.

#### - ONVOLDOENDE ONDERSTEUNING

Het product biedt mogelijk onvoldoende ondersteuning, wat ongemak, letsel of verergering van fysieke beperkingen kan veroorzaken.

#### - INSTABILITEIT

Onvoldoende stevigheid of stabiliteit van het product kan leiden tot kantelen of omvallen, wat letsel of schade kan veroorzaken.

#### - OVERBELASTING BIJ VERKEERD GEBRUIK

Gebruik van het product op een manier waarvoor het niet is ontworpen, kan leiden tot schade aan materiaal of structuur.

#### - GEBRUIK DOOR JONGE KINDEREN

Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 6 jaar. Gebruik is alleen toegestaan onder strikt toezicht van een volwassene om mogelijke gevaren of verkeerd gebruik te voorkomen.

### 2.3 WAARSCHUWINGEN

Het product moet worden vervangen als aan een of meer van de volgende criteria wordt voldaan:

- Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- De algemene toestand van de gebruiker is een belangrijk onderdeel van de risicobeoordeling.

### 2.4 VOORZORGSMAATREGELEN

- Personen met zelfbeschadigend gedrag mogen niet alleen worden gelaten met het product.

## 3. GARANTIE

Op dit product zit een garantie van 12 maanden. De garantietermijn begint op de aankoopdatum (vermeld op het aankoopbewijs). Tijdens de garantietermijn kunt u klachten over een defect VITILITY-product indienen bij uw dealer of bij het opgegeven serviceadres. Gedurende deze periode repareren wij gratis alle defecten als gevolg van gebrekkige materialen of werking. Onjuist gebruik, vallen, stoten en dergelijke zijn uitgesloten van de garantie. Een nieuwe garantietermijn gaat niet in als het product wordt gerepareerd of vervangen; de garantietermijn van 12 maanden vanaf de aankoopdatum blijft ongewijzigd. Elke garantie vervalt in geval van niet-naleving, zoals gebruik anders dan bedoeld, reparaties en wijzigingen aan de hoofdbeschermer of onderdelen daarvan door onbevoegde personen.

## 4. SYMBOLEN

De symbolen en hun uitleg staan op pagina 19.

## 5. MELDING VAN ERNSTIG INCIDENT

In geval van ernstige incidenten met betrekking tot het gebruik van het apparaat, dient dit tijdig te worden gemeld bij uw plaatselijke dealer en de nationale bevoegde autoriteit. De plaatselijke dealer zal de informatie doorsturen naar de fabrikant.

## DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG

# Wandbügel mit Schnellbefestigung - klein (4 cm)

### 1. ZWECKBESTIMMUNG

Der Haltegriff Quick Mobile Rail unterstützt z. B. bei der Nutzung in der Dusche. Die Montage dieses mobilen Griffes gelingt in wenigen Sekunden, ganz ohne Bohren und Schrauben. Zwei starke Saugnäpfe haften fest auf glatten, nicht porösen Oberflächen. Einfach den Vakuumhebel nach unten drücken und der Haltegriff sitzt fest. Achtung! Der Haltegriff eignet sich nicht, um das gesamte Körpergewicht zu tragen.

### 2. RISIKEN & WARNHINWEISE

Die Bewertung aller Risiken durch das Risikomanagement von VITALITY hat gezeigt, dass das verbleibende Restrisiko so gering wie möglich ist.

#### 2.1 SICHERHEITSRICHTLINIEN

Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung in einwandfreiem Zustand ist.

#### 2.2 POTENZIELLE RISIKEN

##### - FALSCHES MONTAGE ODER INSTALLATION

Falsche Montage oder Installation kann zu verminderter Leistung oder gefährlichen Situationen führen.

##### - UNZUREICHENDE UNTERSTÜTZUNG

Das Produkt bietet möglicherweise unzureichende Unterstützung, was zu Unannehmlichkeiten, Verletzungen oder einer Verschlimmerung von physischen Einschränkungen führen kann.

##### - INSTABILITÄT

Unzureichende Festigkeit oder Stabilität des Produkts kann zu Kippen oder Umfallen führen, was Verletzungen oder Schäden verursachen kann.

##### - ÜBERLASTUNG BEI UNSACHGEMÄSSER VERWENDUNG

Die Verwendung des Produkts in einer Weise, für die es nicht entwickelt wurde, kann zu Schäden am Material oder an der Struktur führen.

##### - NUTZUNG DURCH JUNGE KINDER

Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet. Die Nutzung ist nur unter strenger Aufsicht eines Erwachsenen erlaubt um mögliche Gefahren oder Fehlgebrauch zu vermeiden.

#### 2.3 WARNUNGEN

Das Produkt muss ersetzt werden, wenn eines oder mehrere der folgenden Kriterien erfüllt sind:

- Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist.
- Der allgemeine Zustand des Benutzers ist ein wichtiger Teil der Risikobewertung.

#### 2.4 VORSICHTSMASSNAHMEN

- Personen mit selbstschädigendem Verhalten dürfen

nicht allein mit dem Produkt gelassen werden.

### 3. GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 12 Monaten. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum (auf der Kaufquittung vermerkt). Während der Garantiezeit können Sie Beanstandungen eines defekten VITALITY-Produkts bei Ihrem Händler oder der angegebenen Servicestelle einreichen. In diesem Zeitraum beheben wir alle Mängel aufgrund fehlerhafter Materialien oder Bedienung kostenlos. Unsachgemäße Handhabung, Stürze, Stöße und Ähnliches sind von der Garantie ausgeschlossen. Ein neuer Garantiezeitraum beginnt nicht, wenn das Produkt repariert oder ausgetauscht wird; die 12-monatige Garantiezeit ab Kaufdatum bleibt unverändert. Jegliche Garantie erlischt bei Nichteinhaltung, z. B. bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, Reparaturen und Änderungen an dem Kopfschutz oder seinen Komponenten durch nicht autorisierte Personen.

### 4. SYMBOLE

Die Symbole und ihre Erklärungen finden Sie auf Seite 19.

### 5. MELDUNG ÜBER SCHWERWIEGENDEN VORFALL

Im Falle schwerwiegender Vorfälle im Zusammenhang mit der Nutzung des Geräts sollte dies umgehend Ihrem lokalen Händler und der zuständigen nationalen Behörde gemeldet werden. Der lokale Händler wird die Informationen an den Hersteller weiterleiten.

## FRANÇAIS MODE D'EMPLOI

# Barre d'appui Quick mobile rail - petite

## 1. UTILISATION PRÉVUE

La barre mobile Quick est conçue pour fournir un soutien, par exemple lors de l'entrée et de la sortie de la douche. Le rail mobile Quick peut être fixé et retiré en quelques secondes grâce à des ventouses. Il n'est pas nécessaire de percer des trous ou d'utiliser des vis. Les deux ventouses puissantes sont fermement pressées sur une surface solide et non poreuse. Appuyez simplement sur les poignées de l'aspirateur pour fixer le rail Quick Mobile.

## 2. RISQUES ET AVERTISSEMENTS

L'évaluation de tous les risques par la gestion des risques de VITILITY a montré que le risque résiduel restant est aussi faible que raisonnablement possible.

### 2.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous que le produit est en parfait état avant de l'utiliser.

### 2.2 RISQUES POTENTIELS

#### - MONTAGE OU INSTALLATION INCORRECTS

Un montage ou une installation incorrects peut entraîner une performance réduite ou des situations dangereuses.

#### - SOUTIEN INSUFFISANT

Le produit peut offrir un soutien insuffisant, ce qui peut entraîner de l'inconfort, des blessures ou aggraver les limitations physiques.

#### - INSTABILITÉ

Une résistance ou une stabilité insuffisante du produit peut entraîner un basculement ou une chute, ce qui peut causer des blessures ou des dommages.

#### - SURCHARGE DUE À UNE MAUVAISE UTILISATION

L'utilisation du produit d'une manière pour laquelle il n'a pas été conçu peut entraîner des dommages au matériel ou à la structure.

#### - UTILISATION PAR DE JEUNES ENFANTS

Ce produit n'est pas adapté aux enfants de moins de 6 ans. Son utilisation n'est autorisée que sous la surveillance stricte d'un adulte pour éviter tout danger ou mauvaise utilisation.

### 2.3 AVERTISSEMENTS

Le produit doit être remplacé si l'un ou plusieurs des critères suivants s'appliquent :

- Ne pas utiliser si le produit est endommagé.
- L'état général de l'utilisateur est une partie importante de l'évaluation des risques.

### 2.4 PRÉCAUTIONS

- Les personnes ayant des comportements autodestructeurs ne doivent pas être laissées seules

avec le produit.

## 3. GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie de 12 mois. La période de garantie commence à la date d'achat (indiquée sur le reçu). Pendant la période de garantie, vous pouvez soumettre toute réclamation concernant un produit VITILITY défectueux à votre revendeur ou à l'adresse de service indiquée. Durant cette période, nous réparerons gratuitement tous les défauts dus à des matériaux ou à un fonctionnement défectueux. Une mauvaise manipulation, les chutes, les impacts, et autres cas similaires sont exclus de la garantie. Une nouvelle période de garantie ne commence pas si le produit est réparé ou échangé ; la période de garantie de 12 mois à partir de la date d'achat reste inchangée. Toute garantie expire en cas de non-respect des conditions, notamment en cas d'utilisation non conforme, de réparations ou de modifications effectuées sur le protège-tête ou ses composants par des personnes non autorisées.

## 4. SYMBOLES

Les symboles et leurs explications se trouvent à la page 19.

## 5. NOTIFICATION D'INCIDENT GRAVE

En cas d'incidents graves liés à l'utilisation de l'appareil, ceux-ci doivent être signalés rapidement à votre revendeur local et à l'autorité nationale compétente. Le revendeur local transmettra les informations au fabricant.

## DANSK BRUGSANVISNING

# Støttegreb med sugekopper - lille

## 1. TILTÆNKT BRUG

Quick mobilskinnen er designet til at give støtte, for eksempel ved ind- og udstigning af bruseren. Quick mobilskinnen kan fastgøres og fjernes inden for få sekunder med sugekopper. Det er ikke nødvendigt at bore huller eller bruge skrue. De to kraftige sugekopper presses fast på en ikke-porøs, robust overflade. Tryk blot vakuumbåndtagene ned for at fastgøre Quick Mobile-skinnen.

## 2. RISICI & ADVARSLER

Evalueringen af alle risici foretaget af VITALITY's risikostyring viste, at den resterende risiko er så lav som rimeligt muligt.

### 2.1 SIKKERHEDSRETNINGSLINJER

Sørg for, at produktet er i fejlfri stand, før det tages i brug.

### 2.2 POTENTIELLE RISICI

#### - UKORREKT MONTERING ELLER INSTALLATION

Ukorrekt montering eller installation kan føre til nedsat ydeevne eller farlige situationer.

#### - UTILSTRÆKKEG STØTTE

Produktet kan muligvis give utilstrækkelig støtte, hvilket kan forårsage ubehag, skader eller forværre fysiske begrænsninger.

#### - USTABILITET

Utilstrækkelig styrke eller stabilitet af produktet kan føre til kipning eller væltning, hvilket kan forårsage skader eller beskadigelse.

#### - OVERBELASTNING VED FORKERT BRUG

Brug af produktet på en måde, det ikke er designet til, kan føre til skader på materiale eller struktur.

#### - BRUG AF UNGE BØRN

Dette produkt er ikke egnet til børn under 6 år. Brug er kun tilladt under streng opsyn af en voksen for at forhindre mulige farer eller misbrug.

### 2.3 ADVARSLER

Produktet skal udskiftes, hvis et eller flere af følgende kriterier er opfyldt:

- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Brugerens generelle tilstand er en vigtig del af risikovurderingen.

### 2.4 FORHOLDSREGLER

- Personer med selvskadende adfærd må ikke være alene med produktet.

## 3. GARANTI

Der er 12 måneders garanti på dette produkt. Garantiperioden begynder på købsdatoen (angivet på købsbeviset). I

garantiperioden kan du indsende eventuelle klager over et defekt VITALITY-produkt til din forhandler eller til den specificerede serviceadresse. I denne periode vil vi gratis reparere alle fejl, der skyldes defekte materialer eller betjening. Forkert håndtering, fald, stød og lignende er undtaget fra garantien. En ny garantiperiode starter ikke, hvis produktet repareres eller udskiftes; de 12 måneders garantiperiode fra købsdatoen fortsætter uændret. Enhver garanti bortfalder ved manglende overholdelse, såsom brug, der ikke er tilsigtet, reparationer og ændringer foretaget på hovedbeskyttelsen eller dens komponenter af uautoriserede personer.

## 4. SYMBOLER

Symbolerne og deres forklaringer findes på side 19.

## 5. ANMELDELSE AF ALVORLIG HÆNDELSE

I tilfælde af alvorlige hændelser i forbindelse med brug af enheden, skal det rapporteres til din lokale forhandler og den nationale kompetente myndighed rettidigt. Den lokale forhandler vil videresende oplysningerne til producenten.

## EESTI KEEL KASUTUSJUHEND

# Tugikäepide iminappadega - väike

## 1. KAVANDATUD KASUTUS

Quick mobile relss on loodud pakkuma tuge näiteks duši alla tulles ja sealt väljumisel. Quick mobiilse siini saab kinnitada ja eemaldada mõne sekundi jooksul iminappadega. Akude puurimine või kruvide kasutamine ei ole vajalik. Kaks võimsat iminappa surutakse tugevalt mittepoorsele, tugevale pinnale. Quick Mobile siini kinnitamiseks vajutage lihtsalt vaakumkäepidemed alla.

## 2. RISKID JA HOIATUSED

VITILITY riskijuhtimise teostatud riskide hindamine näitas, et jäärisk on võimalikult madal.

### 2.1 OHUTUSJUHISED

Enne kasutamist veenduge, et toode oleks veatus seisukorras.

### 2.2 POTENTSIAALSED RISKID

#### - VÄÄRMONTAAŽ VÕI PAIGALDUS

Väärmontaaž või paigaldus võib viia vähenenud jõudluse või ohtlike olukordadeni.

#### - EBAPIISAV TUGI

Toode võib pakkuda ebapiisavat tuge, mis võib põhjustada ebamugavust, vigastusi või füüsiliste piirangute halvenemist.

#### - EBASTABIILSUS

Toote ebapiisav tugevus või stabiilsus võib põhjustada ümberminekuid või kukkumisi, mis võivad põhjustada vigastusi või kahju.

#### - ÜLEKOORMUS VALE KASUTAMISE TÕTTU

Toote kasutamine viisil, milleks see pole mõeldud, võib põhjustada materjali või struktuuri kahjustusi.

#### - KASUTAMINE VÄIKESTE LASTE POOLT

Toode ei sobi lastele kes on alla 6 aasta vana. Kasutamine on lubatud ainult täiskasvanu range järelevalve all võimalike ohtude või vale kasutamise vältimiseks.

### 2.3 HOIATUSED

Toode tuleb asendada, kui esineb üks või mitu järgmistest kriteeriumidest:

- Ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud.
- Kasutaja üldine seisund on oluline osa riskihindamisest.

### 2.4 ETTEVAATUSABINÕUD

- Enesekahjustamise kalduvusega inimesi ei tohi jätta tootega ükski.

## 3. GARANTII

Sellele tootele kehtib 12-kuuline garantii. Garantiaeg algab

ostukuupäevast (näidatud ostutšekil). Garantii perioodi jooksul saate esitada kaebusi defektse VITILITY-toote kohta oma edasimüüjale või määratud teenindusaadressile.

Selle aja jooksul parandame kõik vead, mis on põhjustatud vigastest materjalidest või tööst, tasuta. Valesti käsitsemine, kukkumised, löögid ja sarnased juhtumid ei kuulu garantii alla. Kui toodet remonditakse või vahetatakse, ei alga uus garantii periood; 12-kuuline garantii aeg ostukuupäevast jätkub muutumatult. Garantii kaotab kehtivuse, kui esineb mittevastavus, näiteks kasutamine mitte ettenähtud viisil, kaitsepa või selle osade remont ja muudatused volitamata isikute poolt.

## 4. SÜMBOLID

Sümbolid ja nende selgitused leiате leheküljelt 19.

## 5. TÕSISE VAHEJUHTUMI TEAVITAMINE

Tõsiste vahejuhtumite korral, mis on seotud seadme kasutamisega, tuleb sellest õigeaegselt teavitada kohalikku edasimüüjat ja riiklikku pädevat asutust. Kohalik edasimüüja edastab teabe tootjale.



# Asidero con ventosas - pequeño

## 1. USO PREVISTO

La barra móvil Quick está diseñada para ofrecer apoyo, por ejemplo, al entrar y salir de la ducha. El riel móvil Quick se puede colocar y quitar en pocos segundos con ventosas. No es necesario taladrar agujeros ni utilizar tornillos. Las dos potentes ventosas se presionan firmemente sobre una superficie estable y no porosa. Simplemente presione las manijas de la aspiradora hacia abajo para fijar el riel Quick Mobile.

## 2. RIESGOS Y ADVERTENCIAS

La evaluación de todos los riesgos por parte de la gestión de riesgos de VITILITY mostró que el riesgo residual restante es tan bajo como sea razonablemente posible.

### 2.1 DIRECTRICES DE SEGURIDAD

Asegúrate de que el producto esté en perfectas condiciones antes de usarlo.

### 2.2 RIESGOS POTENCIALES

#### - MONTAJE O INSTALACIÓN INCORRECTOS

Una montaje o instalación incorrecta puede provocar un rendimiento reducido o situaciones peligrosas.

#### - SOPORTE INSUFICIENTE

El producto puede proporcionar un soporte insuficiente, lo que puede causar incomodidad, lesiones o empeorar las limitaciones físicas.

#### - INESTABILIDAD

La falta de resistencia o estabilidad del producto puede provocar vuelcos o caídas, lo que puede causar lesiones o daños.

#### - SOBRECARGA POR USO INCORRECTO

El uso del producto de una manera para la que no fue diseñado puede causar daños al material o a la estructura.

#### - USO POR NIÑOS PEQUEÑOS

Este producto no es adecuado para niños menores de 6 años. Su uso solo está permitido bajo estricta supervisión de un adulto para prevenir posibles peligros o mal uso.

### 2.3 ADVERTENCIAS

El producto debe reemplazarse si se cumple uno o más de los siguientes criterios:

- No utilice el producto si está dañado.
- La condición general del usuario es una parte importante de la evaluación de riesgos.

### 2.4 PRECAUCIONES

- Las personas con comportamientos autolesivos no deben quedarse solas con el producto.

## 3. GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 12 meses. El período de garantía comienza en la fecha de compra (indicado en el recibo de compra). Durante el período de garantía, puede presentar cualquier queja sobre un producto VITILITY defectuoso a su distribuidor o a la dirección de servicio especificada. Durante este período, repararemos gratuitamente todos los defectos debidos a materiales defectuosos o funcionamiento incorrecto. El manejo indebido, las caídas, los impactos y similares quedan excluidos de la garantía. No se inicia un nuevo período de garantía si el producto se repara o cambia; el período de garantía de 12 meses desde la fecha de compra continúa sin cambios. Cualquier garantía expira en caso de incumplimiento, como el uso indebido, reparaciones y alteraciones realizadas en el protector de cabeza o sus componentes por personas no autorizadas.

## 4. SÍMBOLOS

Los símbolos y sus explicaciones se encuentran en la página 19.

## 5. NOTIFICACIÓN DE INCIDENTE GRAVE

En caso de incidentes graves relacionados con el uso del dispositivo, debe informarlo a su distribuidor local y a la autoridad nacional competente de manera oportuna. El distribuidor local enviará la información al fabricante.

ITALIANO MANUALE D'USO

## Maniglia mobile Quick mobile - taglia piccola

### 1. USO PREVISTO

I lacci elastici ti permettono di indossare o togliere le scarpe autonomamente, senza piegarti. I lacci elastici devono essere allacciati solo una volta, dopodiché le scarpe diventano slip-on.

### 2. RISCHI E AVVERTENZE

La valutazione di tutti i rischi da parte della gestione del rischio di VITALITY ha dimostrato che il rischio residuo rimanente è il più basso ragionevolmente possibile.

#### 2.1 LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Assicurati che il prodotto sia in perfette condizioni prima dell'uso.

#### 2.2 RISCHI POTENZIALI

##### - MONTAGGIO O INSTALLAZIONE ERRATI

Un montaggio o un'installazione errati possono portare a prestazioni ridotte o situazioni pericolose.

##### - SUPPORTO INSUFFICIENTE

Il prodotto potrebbe fornire un supporto insufficiente, il che potrebbe causare disagio, lesioni o peggiorare le limitazioni fisiche.

##### - INSTABILITÀ

Una resistenza o stabilità insufficiente del prodotto può portare a ribaltamenti o cadute, con rischio di lesioni o danni.

##### - SOVRACCARICO DOVUTO A UN USO SCORRETTO

Usare il prodotto in un modo per cui non è stato progettato può causare danni al materiale o alla struttura.

##### - UTILIZZO DA PARTE DI BAMBINI PICCOLI

Questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore ai 6 anni. L'uso è consentito solo sotto stretta supervisione di un adulto per prevenire possibili pericoli o usi impropri.

#### 2.3 AVVERTENZE

Il prodotto deve essere sostituito se è richiesto da uno o più dei seguenti criteri:

- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- La condizione generale dell'utente è una parte importante della valutazione del rischio.

#### 2.4 PRECAUZIONI

- Le persone con comportamenti autolesionistici non devono essere lasciate sole con il prodotto.

### 3. GARANTIE

Il prodotto è coperto da una garanzia di 12 mesi. Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto (riportata sulla ricevuta). Durante il periodo di garanzia, puoi presentare

reclami relativi a un prodotto VITALITY difettoso presso il tuo rivenditore o all'indirizzo di assistenza specificato. Durante questo periodo, ripareremo gratuitamente tutti i difetti dovuti a materiali o funzionamenti difettosi. La manipolazione impropria, le cadute, gli urti e simili sono esclusi dalla garanzia. Un nuovo periodo di garanzia non inizia se il prodotto viene riparato o sostituito; il periodo di garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto rimane invariato. La garanzia decade in caso di mancato rispetto, come l'uso non conforme, riparazioni e modifiche effettuate al protetto-testa o ai suoi componenti da persone non autorizzate.

### 4. SIMBOLI

I simboli e le loro spiegazioni si trovano a pagina 19.

### 5. NOTIFICA DI INCIDENTE GRAVE

In caso di incidenti gravi legati all'uso del dispositivo, questi devono essere segnalati tempestivamente al rivenditore locale e all'autorità nazionale competente. Il rivenditore locale inoltrerà le informazioni al produttore.

## LATVIEŠU LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

# Pārvietojamās margas - nelielas

### 1. PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

Ātrā mobilā sliede ir paredzēta, lai sniegtu atbalstu, piemēram, iekāpjot un izkāpjot no dušas. Quick mobilo sliedi var piestiprināt un noņemt dažādu sekunžu laikā ar piesūcekņiem. Nav nepieciešams urbt caurumus vai izmantot skrūves. Divi spēcīgi piesūcekņi ir stingri nospiesti uz neporainas, izturīgas virsmas. Vienkārši nospiediet vakuuma rokturus, lai salabotu Quick Mobile sliedi.

### 2. RISKI UN BRĪDINĀJUMI

VITALITY riska pārvaldības veiktais visu risku novērtējums parādīja, ka atlikušais risks ir iespējami mazs.

#### 2.1 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Pārlicinieties, ka produkts ir nevainojamā stāvoklī pirms lietošanas.

#### 2.2 POTENCIĀLIE RISKI

##### - NEKOREKTA MONTĀŽA VAI UZSTĀDĪŠANA

Nekorekta montāža vai uzstādīšana var izraisīt samazinātu veikspēju vai bīstamas situācijas.

##### - NEPIETIEKAMS ATBALSTS

Produkts var nodrošināt nepietiekamu atbalstu, kas var izraisīt diskomfortu, traumas vai pasliktināt fiziskos ierobežojumus.

##### - NESTABILITĀTE

Produkta nepietiekama izturība vai stabilitāte var izraisīt apgāšanos vai krišanu, kas var izraisīt traumas vai bojājumus.

##### - PĀRSLOGOŠANA NEPAREIZAS LIETOŠANAS DĒĻ

Produkta lietošana tādā veidā, kādam tas nav paredzēts, var izraisīt materiāla vai struktūras bojājumus.

##### - IZMANTOŠANA MAZIEM BĒRNIEM

Šis produkts nav piemērots bērniem kas jaunāki par 6 gadiem. Lietošana ir atļauta tikai pieaugušā stingrā uzraudzībā lai novērstu iespējamus draudus vai nepareizu lietošanu.

#### 2.3 BRĪDINĀJUMI

Produkts ir jāaizstāj, ja pastāv viens vai vairāki no šiem kritērijiem:

- Nelietojiet produktu, ja tas ir bojāts.
- Lietotāja vispārējais stāvoklis ir svarīga riska novērtēšanas daļa.

#### 2.4 PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Cilvēkus ar tieksmi uz paškaitējumu nedrīkst atstāt vienus ar produktu.

### 3. GARANTIJA

Šim produktam ir 12 mēnešu garantija. Garantijas periods

sākas no pirkuma datuma (norādīts uz pirkuma kvīts).

Garantijas periodā jūs varat iesniegt sūdzības par bojātu VITALITY produktu savam tirgotājam vai norādītajai servisa adresei. Šajā periodā mēs bez maksas novērsīsim visus defektus, kas radušies materiālu vai darbības kļūdu dēļ. Nepareiza lietošana, kritieni, triecieni un līdzīgas situācijas nav iekļautas garantijā. Ja produkts tiek labots vai nomainīts, jauns garantijas periods nesākas; 12 mēnešu garantijas periods no pirkuma datuma paliek nemainīgs. Garantija zaudē spēku, ja tiek pārkāpti noteikumi, piemēram, produkts tiek izmantots neatbilstoši, vai to labojusi vai modificējusi neatļauta persona.

### 4. SIMBOLI

Simboli un to skaidrojumi ir atrodami 19 lappusē.

### 5. SMAGAS INCIDENTA PAZIŅOJUMS

Ja rodas nopietni negadījumi, kas saistīti ar ierīces lietošanu, par to savlaicīgi jāziņo vietējam izplatītājam un nacionālajai kompetentajai iestādei. Vietējais izplatītājs pārsūtīs informāciju ražotājam.

## LIETUVIŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

# Rankena su siurbtukais - mažas

### 1. NUMATYTA PASKIRTIS

Greitas mobilus bėgis skirtas palaikyti, pavyzdžiui, įlipant ir išlipant iš dušo. Greitą mobilųjį bėgelį galima pritvirtinti ir nuimti per kelias sekundes su siurbtukais. Gręžti skylės ar naudoti varžtus nebūtina. Du galingi siurbtukai tvirtai prispausti prie neaktyvo, tvirto paviršiaus. Tiesiog paspauskite vakuumines rankenas žemyn, kad pritvirtintumėte „Quick Mobile“ bėgelį.

### 2. RIZIKOS IR ĮSPĖJIMAI

VITILITY rizikų valdymo atlikta visų rizikų analizė parodė, kad likutinė rizika yra kuo mažesnė.

#### 2.1 SAUGOS GAIRĖS

Prieš naudodami įsitikinkite, kad gaminys yra nepriekaištingos būklės.

#### 2.2 POTENCIALŪS PAVOJAI

##### - NETEISINGAS SURINKIMAS ARBA MONTAVIMAS

Neteisingas surinkimas ar montavimas gali sukelti sumažėjusį našumą arba pavojingas situacijas.

##### - NEPAKANKAMA PARAMA

Produktas gali suteikti nepakankamą paramą, o tai gali sukelti diskomfortą, sužeidimus ar pabloginti fizinius apribojimus.

##### - NESTABILUMAS

Produktas nepakankama tvirtumas ar stabilumas gali sukelti apsvertimą arba kritimą, o tai gali sukelti sužalojimus ar žalą.

##### - PERSIKROVIMAS NETEISINGA KASUTAMISE TŪTTU

Produkto naudojimas taip, kaip jis nebuvo sukurtas, gali sukelti medžiagos ar struktūros pažeidimus.

##### - NAUDOJIMAS MAŽAIS VAIKAIS

Šis produktas nėra tinkamas vaikams iki 6 metų. Naudoti galima tik su suaugusiojo griežta priežiūra kad būtų išvengta galimų pavojų ar netinkamo naudojimo.

#### 2.3 ĮSPĖJIMAI

Produktas turi būti pakeistas, jei taikomas vienas ar daugiau iš šių kriterijų:

- Nenaudokite produkto, jei jis pažeistas.
- Bendroji naudotojo būklė yra svarbi rizikos vertinimo dalis.

#### 2.4 ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Žmonių, turinčių polinkį į savęs žalojimą, negalima palikti vienų su produktu.

### 3. GARANTIJA

Šiam gaminiui suteikiama 12 mėnesių garantija. Garantijos

laikotarpis prasideda nuo pirkimo datos (nurodyta pirkimo kvite). Garantijos laikotarpį galite pateikti pretenzijas dėl netinkamo VITILITY produkto savo pardavėjui arba nurodytu aptarnavimo adresu. Šiuo laikotarpiu nemokamai taisysime visus defektus, atsiradusius dėl nekokybiškų medžiagų ar veikimo. Neteisingas naudojimas, kritimai, smūgiai ir panašūs atvejai neįtraukiami į garantiją. Jei gaminys yra taisomas ar keičiamas, naujas garantijos laikotarpis neprasideda; 12 mėnesių garantijos laikotarpis nuo pirkimo datos lieka nepakitęs. Garantija nustoja galioti, jei nesilaikoma naudojimo taisyklių, jei gaminys naudojamas ne pagal paskirtį, remontuojamas ar modifikuojamas neįgaliotų asmenų.

### 4. SIMBOLIAI

Simbolius ir jų paaiškinimus rasite 19 puslapyje.

### 5. RIMTO INCIDENTO PRANEŠIMAS

Esant rimtiems incidentams, susijusiems su prietaiso naudojimu, apie tai reikia laiku pranešti vietiniam pardavėjui ir nacionalinei kompetentingai institucijai. Vietinis pardavėjas perduos informaciją gamintojui.

## NORSK BRUKSANVISNING

# Dusjhåndtak med sugekopper - liten

## 1. TILSIKTET BRUK

Quick mobilskinnen er designet for å gi støtte, for eksempel når du går inn og ut av dusjen. Quick mobilskinnen kan festes og fjernes i løpet av få sekunder med sugekopper. Boring av hull eller bruk av skruer er ikke nødvendig. De to kraftige sugekoppene presses fast på en ikke-porøs, solid overflate. Bare trykk vakuumbåndtakene ned for å fikse Quick Mobile-skinnen.

## 2. RISIKOER OG ADVARSLER

Vurderingen av alle risikoer fra VITILITYs risikostyring viste at den gjenværende risikoen er så lav som rimelig mulig.

### 2.1 SIKKERHETSRETNINGSLINJER

Sørg for at produktet er i feilfri stand før bruk.

### 2.2 POTENSIELLE RISIKOER

#### - UTFØRELSE- ELLER INSTALLASJONSFEIL

Utførelse- eller installasjonsfeil kan føre til redusert ytelse eller farlige situasjoner.

#### - UTILSTREKkelig STØTTE

Produktet kan gi utilstrekkelig støtte, noe som kan forårsake ubehag, skade eller forverre fysiske begrensninger.

#### - INSTABILITET

Utilstrekkelig styrke eller stabilitet på produktet kan føre til velting eller fall, noe som kan forårsake skade eller skade.

#### - OVERBELASTNING VED FEIL BRUK

Bruk av produktet på en måte det ikke er designet for, kan føre til skade på materiale eller struktur.

#### - BRUK AV SMÅ BARN

Dette produktet er ikke egnet for barn under 6 år. Bruk er kun tillatt under streng tilsyn av en voksen for å hindre mulige farer eller misbruk.

### 2.3 ADVARSLER

Produktet må byttes ut hvis ett eller flere av følgende kriterier oppfylles:

- Ikke bruk produktet hvis det er skadet.
- Brukerens generelle tilstand er en viktig del av risikovurderingen.

### 2.4 FORHOLDSREGLER

- Personer med selvskadende atferd må ikke være alene med produktet.

## 3. GARANTI

Dette produktet har en garanti på 12 måneder. Garantiperioden starter fra kjøpsdatoen (angitt på kjøpskvitteringen). I garantiperioden kan du sende inn klager på en defekt VITILITY-vare til forhandleren din eller til den oppgitte

serviceadressen. I denne perioden vil vi reparere alle feil som skyldes material- eller produksjonsfeil, kostnadsfritt. Feilaktig håndtering, fall, støt og lignende er unntatt fra garantien. En ny garantiperiode starter ikke hvis produktet repareres eller byttes; garantiperioden på 12 måneder fra kjøpsdatoen forblir uendret. Garantien bortfaller dersom produktet brukes feil, eller hvis reparasjoner eller modifikasjoner utføres av uautoriserte personer på hodebeskytteren eller dens komponenter.

## 4. SYMBOLER

Symbolene og deres forklaringer finnes på side 19.

## 5. MELDINGER OM ALVORLIG HENDELSE

Ved alvorlige hendelser i forbindelse med bruk av enheten, skal dette rapporteres til din lokale forhandler og nasjonal kompetent myndighet i tide. Den lokale forhandleren vil videre sende informasjonen til produsenten.

# Barra apoio com ventosas - pequeno

## 1. USO PRETENDIDO

A calha móvel Quick foi concebida para fornecer suporte, por exemplo, ao entrar e sair do duche. O trilho móvel Quick pode ser fixado e removido em poucos segundos com ventosas. Não é necessário fazer furos ou usar parafusos. As duas poderosas ventosas são pressionadas firmemente sobre uma superfície resistente e não porosa. Basta pressionar as alças do aspirador para baixo para fixar o trilho Quick Mobile.

## 2. RISCOS E AVISOS

A avaliação de todos os riscos pela gestão de riscos da VITALITY mostrou que o risco residual restante é tão baixo quanto possível.

### 2.1 DIRETRIZES DE SEGURANÇA

Certifique-se de que o produto esteja em perfeitas condições antes de utilizá-lo.

### 2.2 RISCOS POTENCIAIS

#### - MONTAGEM OU INSTALAÇÃO INCORRETAS

Montagem ou instalação incorretas podem levar a desempenho reduzido ou situações perigosas.

#### - SUPORTE INSUFICIENTE

O produto pode oferecer suporte insuficiente, o que pode causar desconforto, lesões ou agravar limitações físicas.

#### - INSTABILIDADE

A falta de resistência ou estabilidade do produto pode levar a tombos ou quedas, o que pode causar lesões ou danos.

#### - SOBRECARGA DEVIDO A USO INCORRETO

O uso do produto de uma maneira para a qual não foi projetado pode causar danos ao material ou à estrutura.

#### - UTILIZAÇÃO POR CRIANÇAS PEQUENAS

Este produto não é adequado para crianças menores de 6 anos. O uso só é permitido sob vigilância rigorosa de um adulto para evitar possíveis perigos ou mau uso.

### 2.3 AVISOS

O produto deve ser substituído se atender a um ou mais dos seguintes critérios:

- Não utilize o produto se estiver danificado.
- A condição geral do utilizador é uma parte importante da avaliação de risco.

### 2.4 PRECAUÇÕES

- Pessoas com comportamento autolesivo não devem ser deixadas sozinhas com o produto.

## 3. GARANTIA

Este produto tem uma garantia de 12 meses. O período de

garantia começa na data de compra (indicada no recibo de compra). Durante o período de garantia, pode apresentar qualquer reclamação sobre um produto VITALITY defeituoso ao seu revendedor ou ao endereço de serviço especificado. Durante este período, iremos reparar gratuitamente todos os defeitos devido a materiais ou operação defeituosos. O manuseio incorreto, quedas, impactos e semelhantes estão excluídos da garantia. Um novo período de garantia não começa se o produto for reparado ou substituído; o período de garantia de 12 meses a partir da data de compra permanece inalterado. Qualquer garantia expira em caso de não conformidade, como uso indevido, reparações ou alterações feitas no protetor de cabeça ou nos seus componentes por pessoas não autorizadas.

## 4. SÍMBOLOS

Os símbolos e suas explicações podem ser encontrados na página 19.

## 5. NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTE GRAVE

Em caso de incidentes graves relacionados ao uso do dispositivo, deve-se relatá-los prontamente ao seu distribuidor local e à autoridade nacional competente. O distribuidor local encaminhará as informações ao fabricante.

РУССКИЙ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

# ручка для ванной комнаты на вакуумных присосках - небольшая

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Мобильная направляющая Quick предназначена для поддержки, например, при входе и выходе из душа. Мобильную направляющую Quick можно прикрепить и снять за несколько секунд с помощью присосок. Сверление отверстий или использование шурупов не требуется. Две мощные присоски плотно прижимаются к непористой, прочной поверхности. Просто нажмите на вакуумные ручки вниз, чтобы зафиксировать направляющую Quick Mobile.

## 2. РИСКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Оценка всех рисков, проведённая управлением рисков VITALITY, показала, что остаточный риск минимален.

### 2.1 РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Убедитесь, что изделие находится в исправном состоянии перед использованием.

### 2.2 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

#### - НЕПРАВИЛЬНАЯ СБОРКА ИЛИ УСТАНОВКА

Неправильная сборка или установка может привести к снижению производительности или опасным ситуациям.

#### - НЕДОСТАТОЧНАЯ ПОДДЕРЖКА

Продукт может обеспечить недостаточную поддержку, что может привести к дискомфорту, травмам или ухудшению физических ограничений.

#### - НЕСТАБИЛЬНОСТЬ

Недостаточная прочность или стабильность продукта может привести к опрокидыванию или падению, что может вызвать травмы или повреждения.

#### - ПЕРЕГРУЗКА ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Использование продукта не по назначению может привести к повреждению материала или структуры.

#### - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ

Этот продукт не подходит для детей младше 6 лет. Использование разрешено только под строгим присмотром взрослого чтобы избежать возможных опасностей или неправильного использования.

### 2.3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Продукт должен быть заменён, если выполняется один или несколько из следующих критериев:

- Не используйте продукт, если он повреждён.
- Общие состояние пользователя является важной частью оценки риска.

### 2.4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Людей с саморазрушающим поведением нельзя

оставлять наедине с продуктом.

## 3. ГАРАНТИЯ

На данный продукт предоставляется гарантия сроком 12 месяцев. Гарантийный период начинается с даты покупки (указанной в чеке). В течение гарантийного периода вы можете подать претензию на неисправный продукт VITALITY вашему продавцу или по указанному адресу сервиса. В этот период мы бесплатно устраним все дефекты, возникшие из-за некачественных материалов или неисправной работы. Неправильное обращение, падения, удары и подобные случаи исключаются из гарантии. Новый гарантийный период не начинается, если продукт отремонтирован или заменён; 12-месячный гарантийный срок с момента покупки остаётся неизменным. Гарантия утрачивает силу в случае несоблюдения условий, например, при использовании не по назначению, ремонте или изменении защитного изделия или его компонентов неуполномоченными лицами.

## 4. СИМВОЛЫ

Символы и их объяснения можно найти на странице 19.

## 5. СООБЩЕНИЕ О СЕРЬЕЗНОМ ИНЦИДЕНТЕ

В случае серьезных инцидентов, связанных с использованием устройства, следует своевременно сообщить об этом местному дилеру и национальному компетентному органу. Местный дилер передаст информацию производителю.

# VITILITY

## SLOVENŠČINA NAVODILA ZA UPORABO

# Mobilni handtag med snabfaste - liten

## 1. NAMEN UPORABE

Mobilna ograja Quick je zasnovana tako, da zagotavlja podporo, na primer pri vstopanju in izstopanju iz prhe. Premično vodilo Quick lahko pritrdite in odstranite v nekaj sekundah s priseski. Vrtanje lukenj ali uporaba vijakov ni potrebna. Dve močni priseski sta trdno pritisnjeni na neporozno, trdno površino. Samo pritisnite vakuumske ročaje navzdol, da pritrdite vodilo Quick Mobile.

## 2. TVEGANJA IN OPOZORILA

Ocena vseh tveganj, ki jo je opravilo upravljanje tveganj podjetja VITILITY, je pokazala, da je preostalo tveganje minimalno.

### 2.1 VARNOSTNE SMERNICE

Pred uporabo zagotovite, da je izdelek brezhiben.

### 2.2 POTENCIALNA TVEGANJA

#### - NAPAČNA MONTAŽA ALI NAMESTITEV

Napačna montaža ali namestitev lahko privedeta do zmanjšane učinkovitosti ali nevarnih situacij.

#### - NEZADOSTNA PODPORA

Izdelek morda ne nudi zadostne podpore, kar lahko povzroči nelagodje, poškodbe ali poslabšanje fizičnih omejitev.

#### - NESTABILNOST

Nezadostna trdnost ali stabilnost izdelka lahko povzroči prevračanje ali padce, kar lahko povzroči poškodbe ali škodo.

#### - PREOBREMENITEV ZARADI NAPAČNE UPORABE

Uporaba izdelka na način, za katerega ni bil zasnovan, lahko povzroči poškodbe materiala ali strukture.

#### - UPORABA S STRANI MAJHNIH OTROK

Ta izdelek ni primeren za otroke mlajše od 6 let. Uporaba je dovoljena le pod strogim nadzorom odrasle osebe da se preprečijo morebitna tveganja ali napačna uporaba.

### 2.3 OPOZORILA

Izdelek je treba zamenjati, če je izpolnjen eden ali več naslednjih kriterijev:

- Ne uporabljajte izdelka, če je poškodovan.
- Splošno stanje uporabnika je pomemben del ocene tveganja.

### 2.4 PREVIDNOSTNI UKREPI

- Oseb, ki se samopoškodujejo, ne smemo pustiti samih z izdelkom.

## 3. GARANCIJA

Na ta izdelek velja 12-mesečna garancija. Garancijsko obdobje začne teči na dan nakupa (naveden na računu).

Med garancijskim obdobjem lahko pritožbe glede okvarjenega izdelka VITILITY naslovite na svojega prodajalca ali na navedeni servisni naslov. V tem obdobju bomo brezplačno popravili vse napake, ki so posledica napačnega materiala ali delovanja. Nepravilno ravnanje, padci, udarci in podobno so izključeni iz garancije. Novo garancijsko obdobje se ne začne, če je izdelek popravljen ali zamenjan; 12-mesečno garancijsko obdobje od datuma nakupa ostane nespremenjeno. Kakršna koli garancija preneha veljati v primeru neskladnosti, kot je uporaba v nasprotju z namenom, popravila ali spremembe zaščitne čelade ali njenih komponent s strani nepooblaščenih oseb.

## 4. SIMBOLI

Simboli in njihova pojasnila so na strani 19.

## 5. OBVEŠČANJE O RESNEM INCIDENTU

V primeru resnih incidentov v zvezi z uporabo naprave je treba to pravočasno prijaviti lokalnemu prodajalcu in nacionalnemu pristojnemu organu. Lokalni prodajalec bo informacije posredoval proizvajalcu.



## SUOMI KÄYTTÖOHJE

**Siirrettävä tukitanko - pieni****1. TARKOITETTU KÄYTTÖ**

Joustavat kengännauhat mahdollistavat kenkien pukemisen ja riisumisen itsenäisesti ilman kumartumista. Joustavat kengännauhat tarvitsee sitoa vain kerran, minkä jälkeen kengästä tulee helppokäyttöinen ilman nauhojen avaamista.

**2. RISKIT JA VAROITUKSET**

VITALITYn riskienhallinnan arviointi osoitti, että jäljelle jäävä riski on niin pieni kuin mahdollista.

**2.1 TURVAOHJEET**

Varmista, että tuote on virheettömässä kunnossa ennen käyttöä.

**2.2 MAHDOLLISET RISKIT****- VÄÄRÄ KOKOONPANO TAI ASENUS**

Väärä kokoonpano tai asennus voi johtaa heikentyneeseen suorituskykyyn tai vaarallisiin tilanteisiin.

**- RIITTÄMÄTÖN TUKEA**

Tuote voi tarjota riittämätöntä tukea, mikä voi aiheuttaa epämukavuutta, vammoja tai pahentaa fyysisiä rajoitteita.

**- EPÄVAKAUS**

Produktin riittämätön kestävyys tai vakaus voi johtaa kaatumiseen tai kaatumiseen, mikä voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.

**- YLIKUORMITUS VIRHEELLISESTÄ KÄYTTÖSTÄ**

Produktin käyttäminen tavalla, johon se ei ole suunniteltu, voi johtaa materiaalin tai rakenteen vaurioitumiseen.

**- KÄYTTÖ NUORTEN LASTEN TOIMESTA**

Tämä tuote ei sovellu alle 6-vuotiaille lapsille. Käyttö on sallittua vain aikuisen tiukassa valvonnassa mahdollisten vaarojen tai väärinkäytön estämiseksi.

**2.3 VAROITUKSET**

Tuote on vaihdettava, jos yksi tai useampi seuraavista kriteereistä täyttyy:

- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Käyttäjän yleinen terveydentila on tärkeä osa riskinarviointia.

**2.4 VAROTOIMET**

- Itsetuhoista käyttäytymistä osoittavia henkilöitä ei saa jättää yksin tuotteen kanssa.

**3. GARANTI**

Der er 12 måneders garanti på dette produkt. Garantiperioden begynder på købsdatoen (angivet på købsbeviset). I garantiperioden kan du indsende eventuelle klager over et defekt VITALITY-produkt til din forhandler eller til den specificerede serviceadresse. I denne periode vil vi gratis

reparere alle fejl, der skyldes defekte materialer eller betjening. Forkert håndtering, fald, stød og lignende er undtaget fra garantien. En ny garantiperiode starter ikke, hvis produktet reparereres eller udskiftes; de 12 måneders garantiperiode fra købsdatoen fortsætter uændret. Enhver garanti bortfalder ved manglende overholdelse, såsom brug, der ikke er tilsigtet, reparationer og ændringer foretaget på hovedbeskyttelsen eller dens komponenter af uautoriserede personer.

**4. SYMBOLIT**

Symbolit ja niiden selitykset löytyvät sivulta 19.

**5. VAKAVAN TAPAUKSEN ILMOITUS**

Jos laitteen käytön yhteydessä ilmenee vakavia tapahtumia, niistä on ilmoitettava viipymättä paikalliselle jälleenmyyjälle ja kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Paikallinen jälleenmyyjä välittää tiedot valmistajalle.

## SVENSKA BRUKSANVISNING

# Prenosni ročaj za kopanje - majhna

## 1. AVSEDD ANVÄNDNING

Den mobila Quick-skenan är designad för att ge stöd, till exempel vid in- och utstigning ur duschen. Den mobila Quick-skenan kan fästas och tas bort inom några sekunder med sugkoppar. Det är inte nödvändigt att borra hål eller använda skruvar. De två kraftfulla sugkopparna pressas fast på en icke-porös, robust yta. Tryck bara ned vakuumbandtagen för att fixera Quick Mobile-skenan.

## 2. RISKER OCH VARNINGAR

Utvärderingen av alla risker av VITALITY riskhantering visade att den kvarvarande risken är så låg som möjligt.

### 2.1 SÄKERHETSRIKTLINJER

Se till att produkten är i felfritt skick innan användning.

### 2.2 POTENTIELLA RISKER

#### - FELAKTIG MONTERING ELLER INSTALLATION

Snitt- eller klämskador

#### - OTILLRÄCKLIGT STÖD

Produkten kan ge otillräckligt stöd, vilket kan orsaka obehag, skador eller förvärra fysiska begränsningar.

#### - INSTABILITET

Otillräcklig styrka eller stabilitet hos produkten kan leda till att den välter eller faller, vilket kan orsaka skador eller skador.

#### - ÖVERBELASTNING VID FELAKTIG ANVÄNDNING

Användning av produkten på ett sätt den inte är designad för kan leda till skador på material eller struktur.

#### - ANVÄNDNING AV UNGA BARN

Denna produkt är inte lämplig för barn under 6 år. Användning är endast tillåten under strikt vuxen tillsyn för att förhindra möjliga faror eller felaktig användning.

### 2.3 VARNINGAR

Produkten måste bytas ut om ett eller flera av följande kriterier uppfylls:

- Använd inte produkten om den är skadad.
- Användarens allmänna tillstånd är en viktig del av riskbedömningen.

### 2.4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Personer med självskadebeteende får inte lämnas ensamma med produkten.

## 3. GARANTI

Denna produkt har en garanti på 12 månader. Garanti-perioden börjar på inköpsdatumet (angivet på kvittot). Under garanti-perioden kan du lämna in klagomål på en defekt VITALITY-produkt till din återförsäljare eller till den

angivna serviceadressen. Under denna period reparerar vi kostnadsfritt alla defekter som beror på bristfälligt material eller funktion. Felaktig hantering, fall, stötar och liknande undantas från garantin. En ny garanti-period startar inte om produkten repareras eller byts ut; garanti-perioden på 12 månader från inköpsdatumet förblir oförändrad. Garantin upphör att gälla vid överträdelser, som felaktig användning, reparationer eller ändringar av huvudskyddet eller dess komponenter av obehöriga personer.

## 4. SYMBOLER

Symbolerna och deras förklaringar finns på sidan 19.


















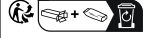
## 5. ANMÄLAN OM ALLVARLIG INCIDENT

Vid allvarliga incidenter relaterade till användningen av enheten ska detta rapporteras till din lokala återförsäljare och den nationella behöriga myndigheten i god tid. Den lokala återförsäljaren kommer att vidarebefordra informationen till tillverkaren.

# VITILITY

## SYMBOLS

	Adjustable length (XX - XX cm)
	Adjustable width (XX - XX cm)
	Length (XX cm)
	Width (XX cm)
	Length x width (XX x XX cm)
	Length x width x depth (XX x XX x XX cm)
	Diameter (XX cm)
	Inner-diameter (XX cm)
	Adjustable angle (XX °)
	Maximal volume (XX L)
	Product weight (XX g)
	Maximal userweight (XX kg)
	Magnifies (X times)
	Suitable for dishwasher (till X °C)
	Unsuitable for dishwasher
	Suitable for microwave (till X °C)
	Unsuitable for microwave
	Handwash only

	Suitable for washingmachine (till X °C)
	Unsuitable for washingmachine
	Tools required
	No tools required
	One size
	Food safe
	Der grune punkt (The green dot)
	LOT - Identification number
	CE-Making
	Reference number
	Read manual before use
	Unique Device Identification
	Medical Device
	Stock keeping unit
	Manufacturer
	Recycle logo
	Forest Stewardship Council - logo
	Triman (France only)